

广告

粤械广审(文)第291031-00530号

wellead 维力®

尿道扩张器套件

Urethral Dilator Set

尿 道 狭 窄 的 解 决 方 案

适用范围

尿道扩张器套件用于
尿道狭窄的扩张



注册证编号: 粤械注准20152021510

使用方法

- 1 在膀胱镜直视下将0.038”导丝置入尿道中内，将导丝越过狭窄部位，进入膀胱
- 2 在固定导丝位置的同时退出膀胱镜，沿导丝以从小到大的顺序推送尿道扩张器，直到扩张至合适的规格为止



规格型号


型号:单支装、套装

规格:普通型、S型

结构及组成

尿道扩张器由聚乙烯材料制成；

- **普通型尿道扩张器套件规格为**
8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，
可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝；
- **S型尿道扩张器套件规格分为**
8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr共10种，
可单根使用或多根任意组成一套使用，选配导丝。

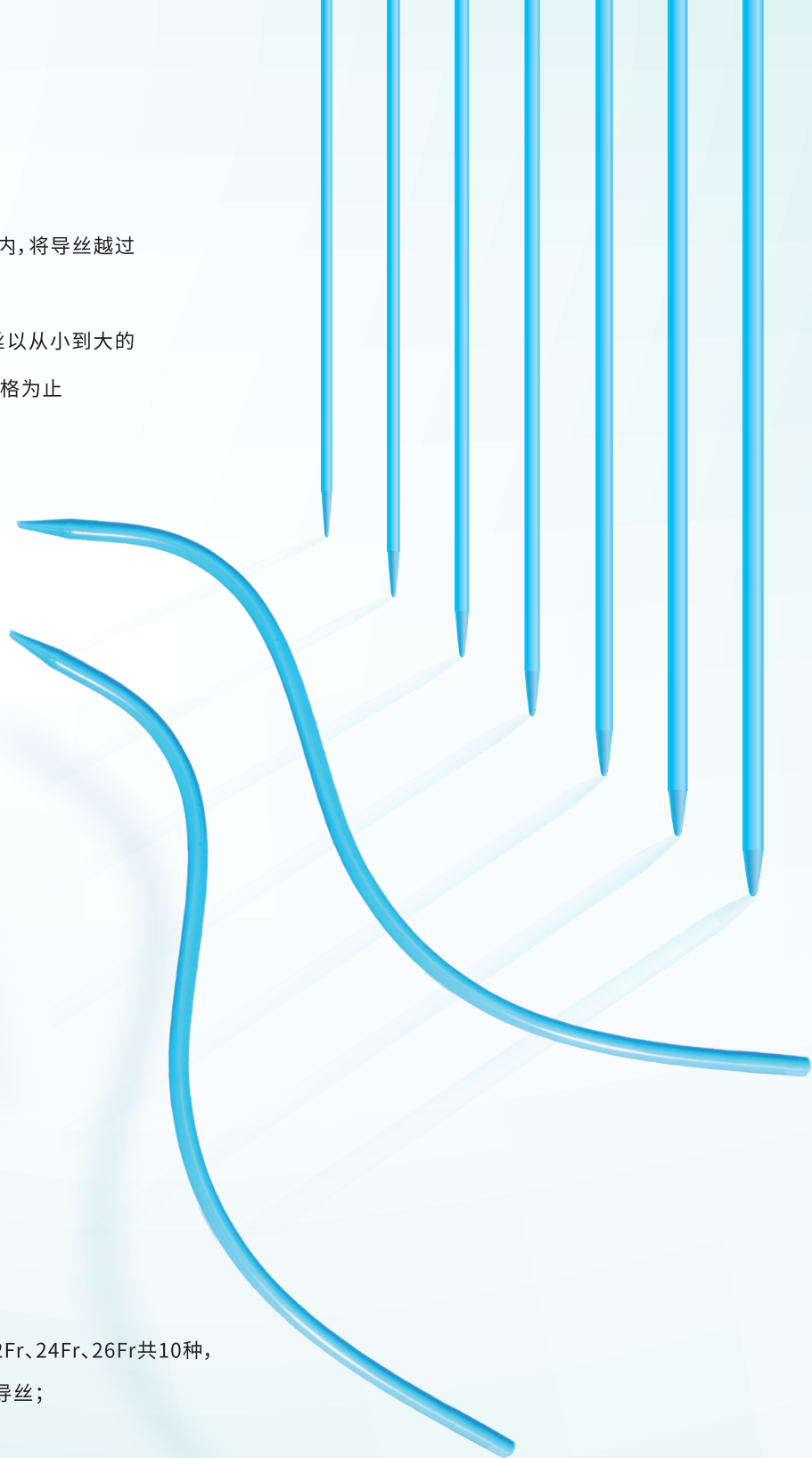

注册人名称:广州维力医疗器械股份有限公司

生产地址:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号/广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用，禁忌内容或者注意事项详见说明书

wellead 维力®